




THERMOSPRINT 96-Well PCR Platte

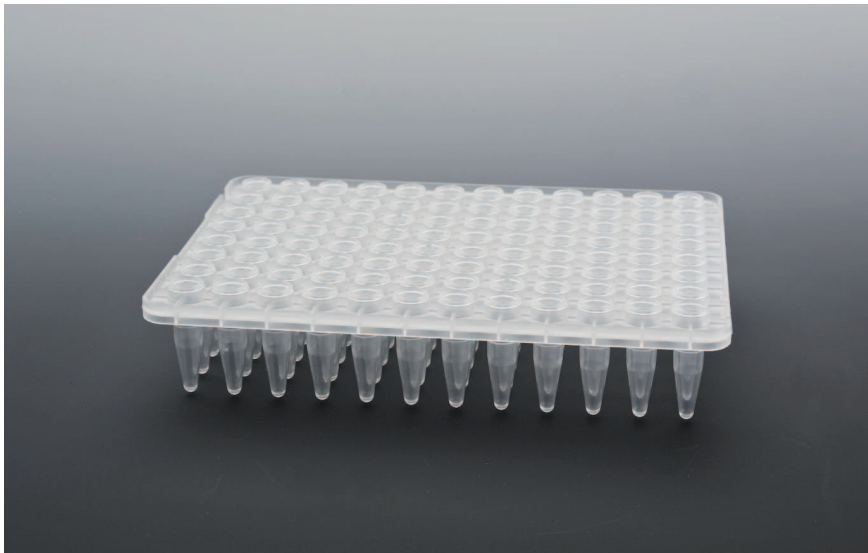

- Verbesserte Well-zu-Well-Abgrenzung mit erhöhten Rändern minimiert bei flächiger Verschluss technik die Gefahr von Kreuzkontaminationen
- Dünnwandige Reaktionsgefäße (< 0,3mm Wandstärke) gewährleisten einen optimalen Wärmetransfer in das Innere der Gefäße
- Hohe Formstabilität und Paßgenauigkeit ermöglichen problemloses Handling in Pipettierautomaten
- Einsetzbar in den gängigen Thermocyclern
- In Kombination mit der Workstation stapelbar
- Barcode-Clip optional
- Alternativ verschließbar mit Silikonmatten, Klebefolien oder durch Heat Sealing
- Geeignet für PCRs und die Probenvorbereitung mit Magnetseparatoren. Verschlussmöglichkeiten finden Sie unter Zubehör bzw. NCC-Technologie.

PP	ISO	DNA RNAse FREE	INHIBITOR FREE	HUMAN DNA FREE
----	-----	-------------------	-------------------	-------------------

	96-Well	96-Well, black	96-Well, Strep. A
Kat. Nr.	312596	312597	315000
Format	96-well	96-well	96-well
Farbe	□	■	□
Beschichtung	-	-	Strept. A.
Stück pro Beutel	25	25	1